

毎日のメンテナンスが手軽に。そしてコート効果が長続き。

メガネレンズの HOYA から新機能コート発売開始

～ヴィーナスガードコート ロングライフ抗菌シリーズ～

HOYA 株式会社（本社:東京都新宿区、代表執行役CEO:池田英一郎）のメガネレンズ事業を担う HOYAビジョンケアカンパニーは2025年4月15日、お手入れが簡単でキレイが長続きする新機能コート <ヴィーナスガードコート ロングライフ抗菌シリーズ> を発売開始いたします。（以下VGロングライフコート）

VG ロングライフコートはこんな方におすすめです

- メガネを長く大事に使いたい
- キズに強いレンズがいい
- ホコリ・花粉などの付着を抑えたい
- 指紋や油はねなどの汚れが気になる
- レンズを衛生的に保ちたい

3つの特長

<1> 強撥水性能

HOYA レンズ史上、最高の撥水力。雨などの水分を弾くことで良好な視界を保ちます。

撥水性能テスト

霧吹きで3回水をかけたのち、30cm離れた場所からドライヤーで冷風を強であて、撥水性能を確認するテスト（風速11m/sec）

テストを動画で確認 



霧吹きでレンズに水を吹きかけた状態

風速11m/secの風をかけた状態

<2> 防汚性能が向上



高い撥油性能により汚れがつきにくく、付着した汚れもふき取りやすいコート。

乳液のような油分を含む汚れに対しても、水で流すだけで簡単に汚れを落とすことができます。

汚れ落ちテスト

少量の乳液をレンズに垂らし、
水につけた時の汚れの
落ちやすさのテスト

テストを動画で確認

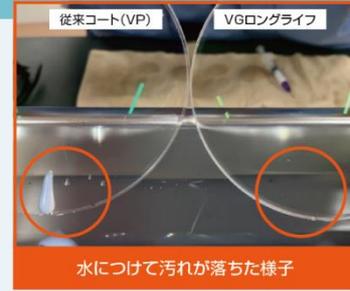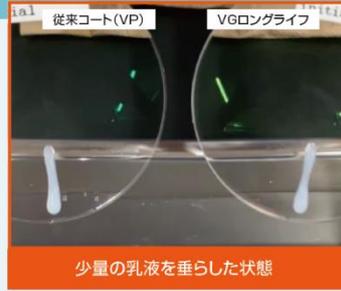

<3> 高い持久性（コートの性能が長持ち）

VG ロングライフコートが採用した STX 撥水膜が持つ強力なコート性能（撥水・撥油・汚れにくさ）が、購入時の性能を長期間維持します。


※コートの性能は使用状況によって異なりますので、キズや熱などによって性能品質低下が早まる場合があります。

▼通常のコートではレンズを拭く回数（摩耗回数）に応じて性能が低下しますが、ロングライフコートでは購入時の性能を長期間維持していることがわかります。

撥水耐久性テスト

レンズクリーニングペーパーに
2kgの荷重をかけて
10,000回往復した
レンズの撥水性能テスト

水接触角とは
水を落とした際にできる液滴の形を数値化したもの。
数値が高いほど濡れにくくはじきが良く、数値が低いほど
濡れやすくはじが悪いことを表しています。

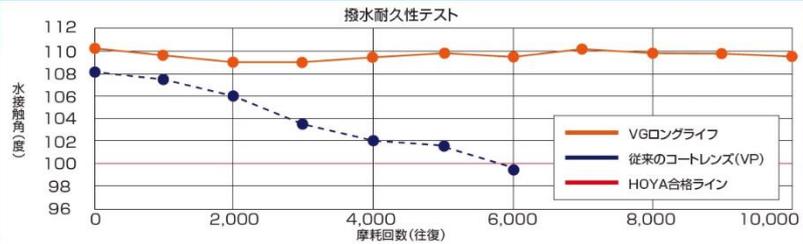


●トップコート：従来の撥水膜 (VP) ※VGシリーズ、SFT、VPコート ●トップコート：STX撥水膜 (VGロングライフシリーズ)
※HOYA調べ

※HOYA 調べ

高性能な撥水膜（STX）が全てのコート性能を保護

機能が何層も重なっているコートの一番上に、従来の撥水膜（VP）より高性能な撥水膜（STX）が覆っているので、コートの基本性能を強力に守ってくれます。

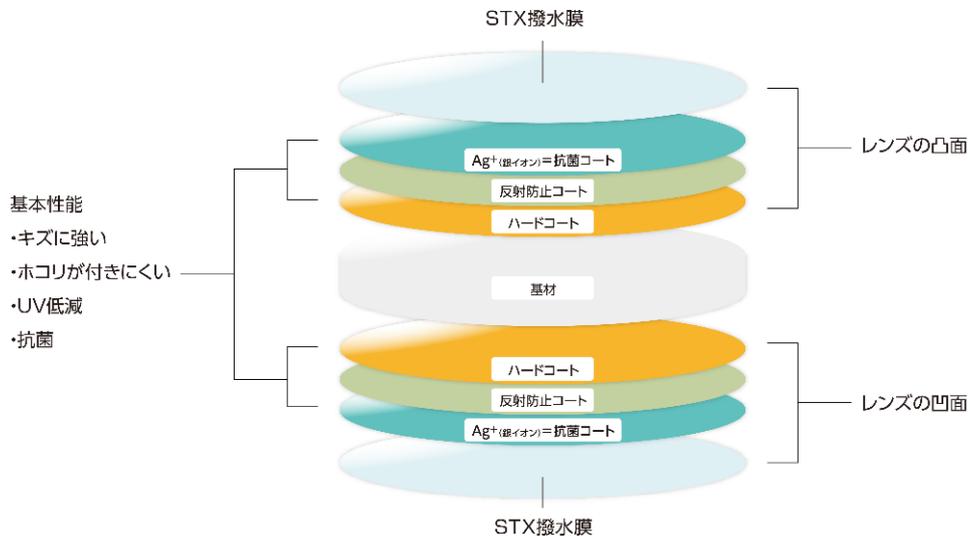

高性能な STX 撥水膜が守るレンズの基本性能

■キズに強い

https://www.vc.hoya.co.jp/lens_search/trouble/13/?from_list=products

■ホコリが付きにくい（帯電防止）

■紫外線をほぼ 100%カット（その効果は半永久的）

https://www.vc.hoya.co.jp/lens_search/trouble/06/

■UV 裏面反射低減

■抗菌機能

https://www.vc.hoya.co.jp/products/koukin/?from_list=products

▼VG ロングライフコートについて

https://www.vc.hoya.co.jp/products/venusguard_longlife/

— — — — —

▽発売日：2025 年 4 月 15 日

▽価格：オープン価格（眼鏡店にてご確認ください）

▽取扱：HOYA レンズ取扱店

https://www.vc.hoya.co.jp/store_search/

— — — — —

【メッセージ】

HOYA は、1941 年東京・保谷（ほうや）町（現在：西東京市）にて「東洋光学硝子製造所」として創業、1962 年メガネレンズの製造を開始しました。1967 年日本で初めて※『境目のない遠近両用メガネレンズ』を発売、2003 年には両面複合累進設計メガネレンズ[BOOM]を開発するなど、より優れた製品の提供を追求してまいりました。※HOYA 調べ

お一人おひとりに合ったメガネレンズをご提供するため、ひいては全てのお客様に最適なメガネを手にしていただくために、私たち HOYA はこれからも進化し続けてまいります。

「We care about your eyes. ～いつもあなたの眼のために」

HOYA ビジョンケアカンパニーホームページ：<https://www.vc.hoya.co.jp/>

HOYA ビジョンケアカンパニー Facebook：<https://www.facebook.com/hoyavc>

【本リリースに関するお問い合わせ先】

HOYA ビジョンケアグループお客様相談室

電話：0120-22-4080

J13A591119-3526/2025-04